

# SalivaChecker<sup>®</sup>

サリバチェッカー<sup>®</sup>  
だ液によるがんリスク検査

## WEB操作 詳細マニュアル ～唾液検査レポートシステム～ ver 1.6

### 目次

---

① ログインする	01
② 被検者の情報を登録する	02
③ 登録した被検者の情報を確認・修正・削除する	03
④ 検査結果を確認する	04
⑤ 再提出検査(再検査)を依頼する	05
⑥ カイゲンファーマに問い合わせる	06
⑦ アカウント情報を変更する	07
⑧ 改訂歴	08

# ① ログインする

## 1. ログイン画面へアクセスする

(例) Google Chrome



ブラウザのアドレスバーに、唾液検査レポートシステム ( <https://salivatech.net/> ) のURLを入力し、Enterキーを押します。QRコードからもアクセス可能です。




- ・対応端末: パソコン、タブレット、スマートフォン
- ・対応ブラウザ: Google Chrome (推奨)、Edge、Safari等

## 2. ユーザID、パスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックする



スマートフォン等でご利用の場合は、右上の  メニューボタンをクリックすると各メニューを展開表示します。

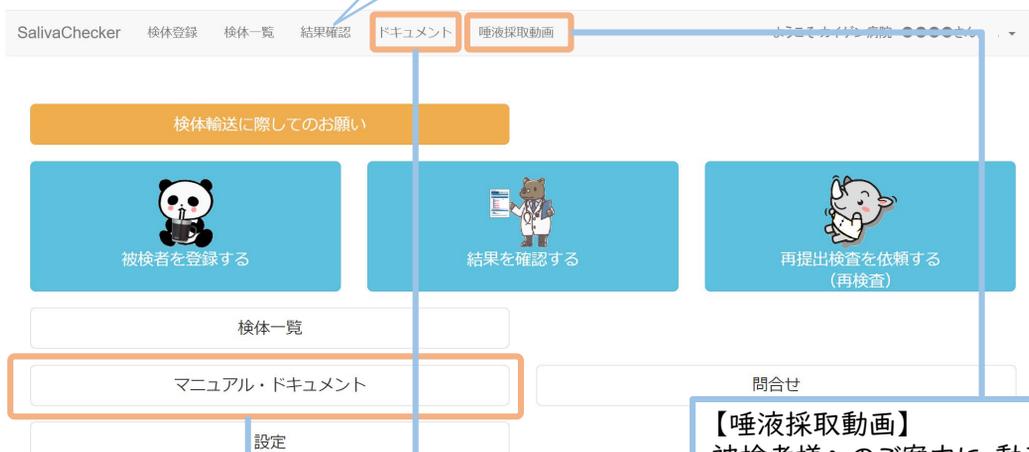

マニュアルやパンフレット等の各種ドキュメントを見ることができます。

ホームページ用のバナーやイラスト等もダウンロード可能です。

【唾液採取動画】  
被検者様へのご案内に、動画をご活用ください。



## ② 被検者の情報を登録する

### 1. [被検者を登録する] ボタンをクリックする



### 2. 被検者の情報を入力し、[登録] ボタンをクリックする

必須項目・・・検体ID、採取場所、採取日、採取時刻、カナ氏名、漢字氏名、性別、生年月日、入力担当

検査依頼 (情報登録)

検体ID 半角 [英大2文字] 数字5桁・数字5桁 **必須**

SK00000-00000 **QR**

採取場所 **必須**

病院 自宅

採取日 半角数字8桁 : yyyyymmdd **必須**

20230405

採取時刻 **必須**

09:00

カルテNo. ※複数回受検時の同一人物判定に使用し

1111

カナ氏名 全角カナ **必須**

フウジタロウ

漢字氏名 **必須** レポート出力名はこちらへ

風神 太郎

性別 **必須**

男性 女性

生年月日 半角数字8桁 : yyyyymmdd **必須**

19830101

発送日 半角数字8桁 : yyyyymmdd

20230405

入力担当 **必須**

改源

備考 ※備品注文など検査会社への連絡は問合せからお願いします。

**登録** メニュー

**【検体ID】**  
容器に貼付したラベルのIDを入力してください。 **QR** ボタンをクリックしてカメラを起動し、QRコードをスキャンすることも可能です。  
※端末によってはカメラが起動しない、QRコードがスキャンできない場合があります。

SK00000-00000 ① 英字(大文字)、②④ 数字5桁、③ ハイフン  
① ② ③ ④ **※全て半角で入力してください。**

**【採取場所】**  
「自宅」を選択すると項目が自宅採取用に切り替わります。

**【漢字氏名】**  
英語名等は漢字氏名欄にご入力ください。

**【発送日】**  
検体の発送予定日を選択してください。

**【備考】**  
申し送り事項(薬や体調など)を入力してください。

**【メニュー】**  
TOP画面に戻ります。

過去の検査結果の推移を確認するために、カルテNo.入力のご協力をお願いします。

# ③ 登録した被検者の情報を確認・修正・削除する

## 1. [検体一覧] ボタンをクリックする




## 2. 検体ID～被検者名をクリックする。



検体ID～被検者名の付近をクリックすると、検体情報編集画面に移ります。

## 2. 検体情報編集画面で登録内容の確認をする。

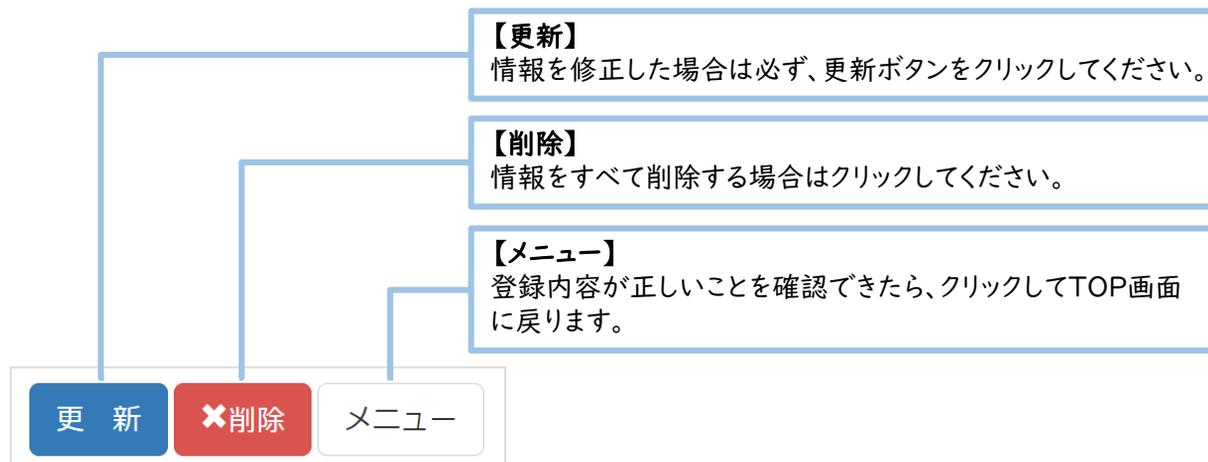

# ④ 検査結果を確認する

## 1. [結果を確認する] ボタンをクリックする



## 2. [印刷] ボタンをクリックし、検査結果レポートを確認する

検査結果

検体ID、カルテ番号、被検者名

検索 🔍

検体ID	カルテNo.	被検者名	採取日	納品日			
SK00000- [redacted]	1111	改源 風太(男性)	3月21日	4月3日	印刷(日本語) 🇯🇵	印刷(English) 🇺🇸	再提出を依頼する
					印刷(简体中文) 🇨🇳	確認済み 📧	

再提出検査 (再検査) 対象の方には、[再提出を依頼する] ボタンが表示されます。クリックすると、再提出検体の登録をすることができます。

[確認済み] ボタンをクリックすると、検査結果一覧に表示されなくなります。確認済みボタン押下後は、検体一覧より検査結果をご確認ください。

メニュー画面の [検体一覧] ボタン、またはメニューバーの検体一覧をクリックしてください。

SalivaChecker 検体登録 検体一覧 結果確認 ドキュメント 唾液採取動画 ようこそ カイゲン病院 ●●●●さん。 ▾

検体輸送に際してのお願い

被検者を登録する

結果を確認する

再提出検査を依頼する (再検査)

検体一覧

マニュアル・ドキュメント

問合せ

設定

## ⑤ 再提出検査（再検査）を依頼する

1. [再提出検査を依頼する] ボタンをクリックし、再提出対象画面で前回の検査結果を探す



※再提出対象の検体のみ表示します

### 再提出対象

検体ID、カルテ番号、被検者名

検索 🔍

検体ID	カルテNo.	被検者名	採取日	納品日	備考
SK00000-	1111	改源 風太(男性)	3月21日	4月3日	

再提出を依頼する

印刷 🖨️

再提出対象者の [再提出を依頼する] ボタンをクリックする

2. 再提出検査（再検査）の被検者情報を入力し、[登録] ボタンをクリックする

### 再提出登録

再提出対象検体ID  
SK00000-

検体ID **必須**  
IA00000-00000 QR 📷

採取場所 **必須**  
別院 自宅

採取日 半角数字8桁: yyyymmdd **必須**  
19000101 📅

採取時刻 **必須**  
09:00 ⌵

カルテNo.  
1111

カナ氏名 全角カナ **必須**  
カイゲンフウタ

漢字氏名 **必須** レポート出力名はこちらへ  
改源 風太

性別  
男性

生年月日  
1977-04-04

発送日 半角数字8桁: yyyymmdd  
19000101 📅

入力担当 **必須**

備考 ※備品注文など検査会社への連絡は問合せからお願いします。

登録 📄

メニュー

お手元の新しい検査キットをご使用いただき、今回採取した唾液のラベルIDを入力してください。

※直接入力される際は、入力間違いにご注意ください。

前回検査時の登録情報を表示します。

# ⑥ カイゲンファーマに問い合わせる

## 1. [問合せ] ボタンをクリックする

検体輸送に際してのお願い

被検者を登録する

結果を確認する

再提出検査を依頼する  
(再検査)

検体一覧

マニュアル・ドキュメント

問合せ

設定

## 2. 受信メッセージ画面で、[メッセージ作成] ボタンをクリックする

受信メッセージ

メッセージ作成

受信メッセージ

送信済みメッセージ

3件

件名	受信日時
レポート完了のお知らせ	4月3日
レポート完了のお知らせ	4月3日
レポート完了のお知らせ	4月3日

メッセージ作成

メッセージ作成

受信メッセージ

送信済みメッセージ

タイトル〇〇について

本文

〇〇も検査前に控えた方がよいでしょうか。  
検査を予約された方より質問がありました。

送信

メッセージ入力後、[送信] ボタンをクリックしてください。  
[送信済みメッセージ] ボタンをクリックすると、送信メッセージを確認することができます。

# ⑦ アカウント情報を変更する

1. ホーム画面右上の「ようこそ〇〇さん。」をクリックし、[設定]をクリックする



2. 変更項目を入力し、[登録]ボタンをクリックする

**設定**

アカウント  
[Redacted]

担当者名

連絡用メールアドレス

パスワード  
6文字以上

確認のため上のパスワードと  
同じものを入力してください

**登録**

登録できるメールアドレスは1件のみです。

